



CM Beads 6FF DEAE Beads 6FF

SP Beads 6FF Q Beads 6FF

目录

1. 产品介绍.....	1
2. 纯化流程.....	2
3. 填料清洗与保存.....	3
4. 问题及解决方案.....	4
5. 订购信息及相关产品.....	4

1. 产品介绍

离子交换填料广泛用于生物制药和生物工程下游蛋白质、核酸及多肽的分离纯化。主要包括强酸性阳离子交换填料、弱酸性阳离子交换填料、强碱性阴离子交换填料和弱碱性阴离子交换填料四种。本产品四种离子交换填料均以高交联的 6%琼脂糖为介质，可耐受较高的流速及更高的化学稳定性，适合实验室及工业大规模纯化，压力/流速曲线见图 1。

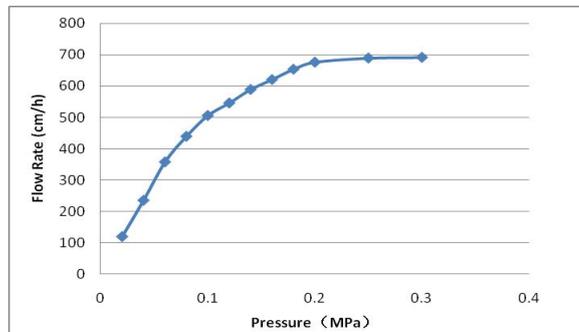


图 1. 介质压力流速曲线 (装柱直径 50 mm, 柱高 150 mm)

CM Beads 6FF

CM Beads 6FF 是一种弱阳离子交换填料，离子交换基团为 $-O-CH_2COO^-$ ，性能见表 1。

表 1. CM Beads 6FF 产品性能

性能	指标
基质	高度交联的 6%琼脂糖微球
离子交换类型	弱阳离子
离子载量	约 0.09-0.13 mmol H ⁺ /ml 介质
粒径	45-165 μm
建议流速	300-600 cm/h
pH 稳定范围	4-13
储存缓冲液	20%乙醇
储存温度	4- 30℃

SP Beads 6FF

SP Beads 6FF 是一种强阳离子交换填料，离子交换基团 $-O-CH_2CH_2CH_2SO_3^-$ ，性能见表 2。

表 2. SP Beads 6FF 产品性能

项目	性能
基质	高度交联的 6%琼脂糖微球
离子交换类型	强阳离子
离子载量	约 0.18-0.25 mmol H ⁺ /ml 介质
粒径	45-165 μm
建议流速	400-700 cm/h
pH 稳定范围	4-13
储存缓冲液	20% 乙醇, 0.2 M 醋酸钠
储存温度	4 - 30℃



DEAE Beads 6FF

DEAE Beads 6FF 是一种弱阴离子交换填料，离子交换基团， $-O-CH_2CH_2-N^+(C_2H_5)_2H$ ，具体性能见表 3。

表 3. DEAE Beads 6FF 产品性能

项目	性能
基质	高度交联的 6%琼脂糖微球
离子交换类型	弱阴离子
离子载量	约 0.11-0.16 mmol Cl/ml 介质
粒径	45-165 μm
建议流速	300-600 cm/h
pH 稳定范围	2-12
储存缓冲液	20%乙醇
储存温度	4 - 30 $^{\circ}C$

Q Beads 6FF

Q Beads 6FF 是一种强阴离子交换填料，离子交换基团如下，具体性能见表 4。 $-O-CH_2CHOHCH_2OCH_2CHOHCH_2N^+(CH_3)_3$

表 4. Q Beads 6FF 产品性能

项目	性能
基质	高度交联的 6%琼脂糖微球
离子交换类型	强阴离子
离子载量	约 0.18-0.25 mmol Cl/ml 介质
粒径	45-165 μm
建议流速	400-700 cm/h
pH 稳定范围	2-12
储存缓冲液	20%乙醇
储存温度	4 - 30 $^{\circ}C$

2. 纯化流程

2.1 缓冲液的准备

所用水和缓冲液在使用之前建议用 0.22 μm 或 0.45 μm 滤膜过滤。

所使用的平衡液和洗脱液，根据不同离子交换填料自行选择。基本原则是低盐上样，高盐洗脱。

2.2 样品准备

样品在上样前建议离心或用 0.22 μm 或 0.45 μm 滤膜过滤，减少杂质，提高蛋白纯化效率和防止堵塞柱子。

2.3 介质装填

2.3.1 重力柱的装填

下面以 CM Beads 6FF 为例介绍装填重力柱的方法。

- 1) 取合适规格的重力层析柱，装入下垫片，加入适量纯水润洗柱管和垫片，关闭下出口。
- 2) 将 CM Beads 6FF 混合均匀，用枪头吸取适量浆液加入至重力柱中（介质实际体积占悬液的一半），打开下出口流干保护液。
- 3) 加入适量纯水冲洗介质，待柱管中液体重力流干后，关闭下出口。
- 4) 装入润洗后的上垫片，确保垫片与填料之前没有空隙，且保持水平。
- 5) 装填好的重力柱可以直接加入平衡液进行平衡，暂不使用时则加入保护液，4-30 $^{\circ}C$ 保存。

2.3.2 中压层析柱的装填

CM Beads 6FF、SP Beads 6FF、DEAE Beads 6FF、Q Beads 6FF 被广泛应用于工业纯化，因此，涉及到各种中低压色谱层析柱的装填，下面以 CM Beads 6FF 为例介绍装填层析柱的方法。

装柱前根据层析柱直径计算柱子底面积，根据所需装柱高度计算所需介质体积，公式如下：

$$V = 1.15\pi r^2 h$$

V: 所需介质体积 ml

1.15: 压缩系数

r: 柱管半径 cm

h: 装填高度 cm



注意：所取悬液体积应为介质体积的两倍，因为介质体积只占悬液总体积的一半，另一半为保护液。

- 1) 用去离子水冲洗层析柱底筛板与接头，确保柱底筛板上无气泡，关闭柱底出口，并在柱底部留出 1-2 cm 的去离子水。
- 2) 将介质悬浮起来，小心的将浆液连续地倒入层析柱中。用玻璃棒沿着柱壁倒入浆液可减少气泡的产生。
- 3) 如果使用储液器，应立即在层析柱和储液器中加满水，将进样分配器放置于浆液表面，连接至泵上，避免在分配器或进样管中产生气泡。
- 4) 打开层析柱底部出口，开启泵，使其在设定的流速下进行。最初应让缓冲液缓慢流过层析柱，然后缓慢增加至最终流速，这样可避免液压对所形成柱床的冲击，也可以避免柱床形成的不均匀。如果达不到推荐的压力或流速，可以用你所使用泵的最大流速，这样也可以得到一个很好的装填效果。（注意：在随后的色谱程序中，不要超过最大装柱流速的 75%）当柱床高度稳定后，在最后的装柱流速下至少再上 3 倍柱床体积的去离子水。标上柱床高度。
- 5) 关闭泵，关闭层析柱出口。
- 6) 如果使用储液器，去除储液器，将分配器置于层析柱中。
- 7) 将分配器推向柱子至标记的柱床高度处。允许装柱液进入分配器，锁紧分配器接头。
- 8) 将装填好的层析柱连接至泵或色谱系统中，开始平衡。如果需要可以重新调整分配器。

2.4 样品纯化流程

2.4.1 孵育法纯化

- 1) 根据纯化的样品量，取适量 **CM Beads 6FF** 加入离心管中，1000 rpm 离心 1 min，吸弃上清；也可加入重力柱中，流干保护液。
- 2) 向离心管中加入 5 倍介质体积的平衡液清洗介质，1000 rpm 离心 1 min，吸弃上清；如使用重力柱，则直接在重力柱中清洗，直接重力流干平衡液；重复两次以上。
- 3) 加入样品，封闭离心管或重力柱管，4℃振荡孵育 2-4 h 或者 37℃孵育 30 min-2 h。
- 4) 孵育结束后，1000 rpm 离心 1 min，吸弃上清，或过滤收集介质，上清保留作为流穿，用于电泳鉴定。
- 5) 用 5 倍介质体积的洗杂液清洗介质，1000 rpm 离心 1 min 或重力柱管过滤，去除上清（注意不要吸到介质），重复 3-5 次，中间建议更换新离心管。
- 6) 加入 3-5 倍柱体积的洗脱液进行洗脱，室温孵育 10-15 min，1000 rpm 离心 1 min 或重力柱管收集洗脱液，可重复 2-3 次。

2.4.2 重力柱法纯化

- 1) 将装填好的 **CM Beads 6FF** 重力柱用 5 倍柱体积平衡液进行平衡，使填料处于与目的蛋白相同的缓冲液体系下，重复 2-3 次。
- 2) 将样品加到平衡好的重力柱中，样品保留时间至少 2 min，保证样品和介质充分接触，收集流出液，可以反复上样增加结合效率。
- 3) 用 10-15 倍柱体积的洗杂液进行洗杂，去除非特异性吸附的杂蛋白，收集洗杂液。
- 4) 使用 5-10 倍柱体积的洗脱液洗脱，分段收集，每一个柱体积收集一管，分别检测，既可以保证所有结合的目的蛋白被洗脱，又可以得到高纯度和高浓度的蛋白。

2.4.3 中压层析柱法纯化

CM Beads 6FF 装填好后，可以用各种常规的中低压色谱系统。

- 1) 将泵管道中注满去离子水。去掉上塞子，将层析柱连接至色谱系统中，打开下出口，将预装柱接到色谱系统中，并旋紧。
- 2) 用 3-5 倍柱体积的去离子水冲洗出储存缓冲液。
- 3) 使用至少 5 倍柱床体积的平衡液平衡色谱柱。
- 4) 利用泵或样品环上样。注：样品的粘度增加使得即使上样体积很少，也会导致层析柱很大的反压。上样量不要超过柱子的结合能力。大量的样品体积也可能造成很大的反压，使得进样器更难使用。
- 5) 用洗杂液冲洗柱子，直到紫外吸收达到一个稳定的基线（一般至少 10-15 个柱体积）。
- 6) 用洗脱液采用一步法或线性梯度洗脱。一步洗脱中，通常 5 倍柱体积洗脱液就足够了。梯度洗脱可以用一个小的梯度，例如 20 倍柱体积或更多，来分离不同结合强度的蛋白质。

2.5 SDS-PAGE 检测

将使用纯化产品得到的样品（包括流出组分、洗杂组分和洗脱组分）以及原始样品使用 SDS-PAGE 检测纯化效果。

3. 填料清洗与保存

3.1 常规清洗

离子交换填料每次使用后可以用 1 M NaCl 甚至更高离子强度溶液或高 pH 溶液清洗，然后用至少 5 倍柱体积的平衡液进行平衡，至离子强度或 pH 值稳定。

3.2 CIP (Cleaning In Place) 清洗

离子交换填料可以重复使用而无需再生，但随着非特异性结合的蛋白的增多和蛋白的聚集，往往造成流速和结合载量都下降，这时可按照下面方法对填料进行清洗。



去除一些沉淀或变性物质，建议使用下面的方法

用2倍柱体积的1 M NaOH溶液进行清洗，然后立即用5倍柱体积的PBS, pH 7.4清洗。

去除一些疏水性吸附造成的非特异性吸附物质

用3-4倍柱体积的70%乙醇或3-4倍柱体积的1% Triton™ X-100清洗，然后立即用5倍柱体积的PBS, pH 7.4清洗。

去除一些离子键结合物质

用3-4倍柱体积的2 M NaCl清洗，然后立即用5倍柱体积的PBS, pH 7.4清洗。

3.3 填料保存

- 1) 未使用的填料储存在带盖容器中，将盖子拧紧置于4-30℃保存。
- 2) 使用过的填料，先用纯水冲洗5倍柱体积，再用20%乙醇冲洗2倍柱体积以上，然后将填料置于4-30℃保存，建议每间隔1-2个月用20%乙醇冲洗2倍柱体积以上置换旧保护液。

4. 问题及解决方案

问题	原因分析	推荐解决方案
柱子反压过高	填料被堵塞	按照第3部分进行填料清洗。
		裂解液中含有微小的固体颗粒，建议上柱前使用滤膜(0.22或0.45 μm)过滤，或者离心去除。
洗脱样品较杂	填料重复多次使用	按照第3部分进行填料清洗或更换新填料
	洗杂不充分	增加洗杂液体积，确保填料充分平衡/洗杂
	样品带电性能相似	优化洗脱条件

5. 订购信息及相关产品

产品名称	货号	规格
Q Beads 6FF	SI001025	25 ml
	SI001100	100 ml
	SI001500	500 ml
	SI00101L	1 L
	SI00110L	10 L
lexCap Q 6FF	SI001C11	1X1 ml
	SI001C51	5X1 ml
	SI001C15	1X5 ml
	SI001C55	5X5 ml
SP Beads 6FF	SI003025	25 ml
	SI003100	100 ml
	SI003500	500 ml
	SI00301L	1 L
	SI00310L	10 L
lexCap SP 6FF	SI003C11	1X1 ml
	SI003C51	5X1 ml
	SI003C15	1X5ml
	SI003C55	5X5 ml
DEAE Beads 6FF	SI005025	25 ml
	SI005100	100 ml
	SI005500	500 ml
	SI00501L	1 L
	SI00510L	10 L
lexCap DEAE 6FF	SI005C11	1X1 ml
	SI005C51	5X1 ml
	SI005C15	1X5 ml
	SI005C55	5X5 ml



CM Beads 6FF	SI007025	25 ml
	SI007100	100 ml
	SI007500	500 ml
	SI00701L	1 L
	SI00710L	10 L
lexCap CM 6FF	SI007C11	1X1 ml
	SI007C51	5X1 ml
	SI007C15	1X5 ml
	SI007C55	5X5 ml
lexCap Select	SI008CS	4X1 ml