



Anti-DYKDDDDK Antibody

产品信息

产品介绍: DYKDDDDK (Flag) 标签是由 8 个氨基酸组成的短肽, 亲水性强, 不会占据其他表位与结合域, 因此更易与抗体结合, Anti-DYKDDDDK Antibody 为小鼠 IgG2B 重组单克隆抗体, 能特异性识别融合蛋白 N 端、C 端的 DYKDDDDK 标签, 广泛用于融合蛋白的纯化、检测和鉴定。

抗体来源: 小鼠

交叉反应: DYKDDDDK 标签融合蛋白

克隆类型: 单克隆抗体

亚型: IgG2B

来源: 重组抗体

纯化方式: rProtein A 亲和纯化

产品纯度: ≥95%, SDS-PAGE 检测

储存缓冲液: 1×PBS (pH7.4), 0.02%叠氮钠, 50%甘油

储存条件: 干冰运输, -20℃可保存 2 年, 避免反复冻融

产品应用

浓度: 1.0 mg/ml

WB=1/2000-1/10000


ELISA=1/5000-1/30000

IP=1/1000

IF=1/200


数据展示

WB 数据:

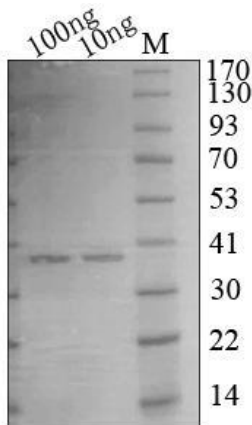

- 1) 样品信息: DYKDDDDK 标签融合蛋白
- 2) 蛋白上样量: 10 ng、100 ng 均有信号
- 3) 蛋白大小: 预测大小: 40 KDa
实际大小: ≈40 KDa
- 4) 二抗信息: 羊抗小鼠 IgG(H+L)-HRP
1/10000

ELISA 数据:

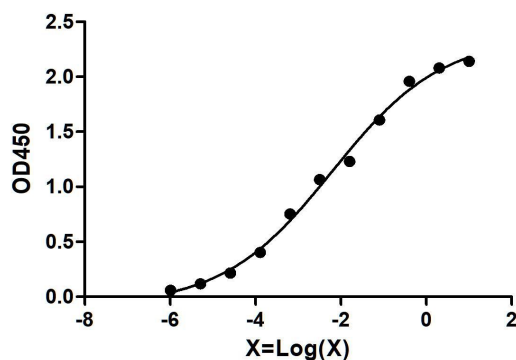


- 1) 样品信息: DYKDDDDK 标签融合蛋白
- 2) 包被浓度: 0.5 µg/ml
- 3) X 轴: 抗体浓度 (µg/ml) 的对数值






IP 数据:

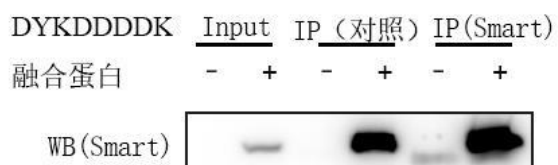

- 1) 样品信息: 200 μ g 293 细胞上清
- 2) 对照组: 国外知名抗体公司

IF 数据:

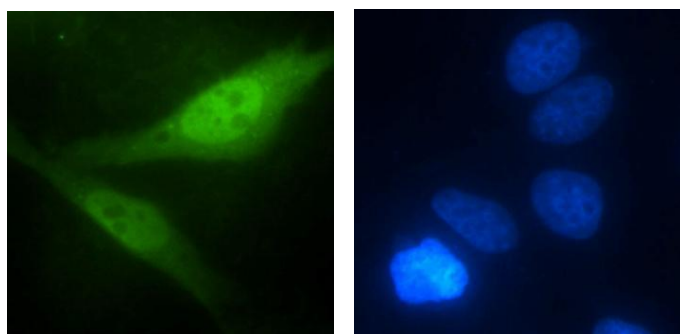

- 1) 样品信息: HeLa 细胞

产品规格

产品名称	货号	规格
Anti-DYKDDDDK Antibody	SLAB0100	20 μ g
	SLAB0101	100 μ g
	SLAB0102	1 mg

